

Detección oportuna y confiable de influenza



Cartucho de prueba FLUAB


DRI-CHEM IMMUNO AG1 es un analizador que detecta el **virus de la influenza A y B** por inmunocromatografía de **alta sensibilidad** reforzada con la tecnología por amplificación de plata.

- Equipo automático de análisis desintométrico
- Reducción de falsos negativos
- Resultados rápidos
- Detección oportuna y automatizada
- Especificidad si es influenza tipo A o B

Reducción de falsos negativos

La tecnología de amplificación con plata mejora la sensibilidad de detección del virus evitando falsos negativos, al magnificar las partículas de oro coloidal empleadas en una inmunocromatografía convencional, para hacerlas 1,000 veces más visibles.

Anticuerpo etiquetado con oro coloidal
antes de la amplificación (50nm)

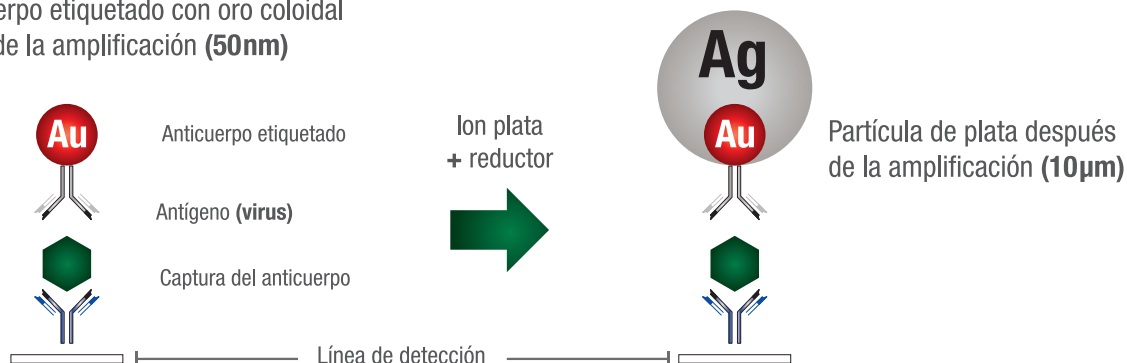

Fácil uso

- 1 Muestra nasofaríngea
- 2 Preparación de la muestra
- 3 Deposición de la muestra
- 4 Inserción del cartucho
- 5 Lectura de la prueba



Características principales

Principio de medición	Reflectometría inmunocromatográfica
Tiempo de medición	3.5 a 15 minutos
Tipo de muestra	Hisopo nasofaríngeo
Volumen de muestra	150 µL
Datos de impresión	Impresión térmica
Dimensiones	180 x 200 mm (D) x 116 mm (H)
Peso	1.8 kg
Requisitos eléctricos	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0.4 A
Temperatura de funcionamiento	15 a 30 °C
Tolerancia de humedad	20 a 80 % HR

FUJIFILM de México.
Ventas Diagnóstico **In Vitro.**
(55) 52635500
diagnosticoinvitro@fujifilm.com.mx
www.fujifilm.com.mx